

# **TRiONiC**

## **Walker bruksanvisning**



SWEDISH  
DESIGN

# Tack för att du valt en Trionic Walker!

Tack för att du valde vår produkt! Vi hoppas verkligen att Trionic Walker 12er kommer att ge dig ökad rörlighet och att du får uppleva många trevliga stunder med den.

Genom att välja en Trionic Walker 12er kommer du att upptäcka en mängd fördelar som förbättrar din åtkomst till olika miljöer och som förhoppningsvis bidrar till att öka din livskvalitet.

Läs bruksanvisningen noggrant före användning och följ alla riktlinjer, särskilt säkerhetsanvisningarna.

Den här bruksanvisningen innehåller alla nödvändiga anvisningar för att justera och använda din Trionic-rullator.

Den här bruksanvisningen är avsedd att ge alla användare och stödpersoner en grund för att säkerställa en säker användning av produkten. Bruksanvisningen innehåller information om förberedelse, användning, underhåll och service av din rullator. För att få ut mesta möjliga av enheten på ett

förnuftigt sätt och bibehålla hanteringssäkerheten, bör du alltid följa de angivna hanteringsanvisningarna. Se till att bruksanvisningen alltid är tillgänglig för användaren.

Den här bruksanvisningen ingår i leveransen. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i de versioner som visas i denna bruksanvisning till följd av fortsatt teknisk utveckling.

Upphovsrätten innehas av tillverkaren. Den här bruksanvisningen omfattas inte av uppdateringstjänst.

## **Återanvändning av tredje part**

Om du ger din rullator till en ny användare, se till att överlämna all teknisk dokumentation som behövs för att säkerställa en säker användning. Trionic Sverige AB ansvarar inte för produktens skick när den överlämnas till en ny användare.

# Walker bruksanvisning

## Trionic Walker 12er

Walker 12er är din pålitliga följeslagare när du promenerar utomhus. De 12 tum stora hjulen och de luftfyllda däcken garanterar en komfortabel körupplevelse, och den är din perfekta vardagsrollator för utomhusbruk. Alla Trionic Walkers är utrustade med synkronstyrning (patentsökt) som eliminerar problemen med wobblande och snedställda framhjul.

Typ:  
Medicinteknisk produkt klass I  
(MDR 2017/745)

Ändamål: Gånghjälpmedel

Tillverkare:

Trionic Sverige AB · Märstagatan 8  
· 75323 Uppsala · Sverige  
support@trionic.com  
08-522 100 50

Manuell revisionsdatum: 2025-05-01

## Tekniska data

	Walker 12er S	Walker 12er M/L
Min höjd:	71 cm	76 cm
Max höjd:	86 cm	96 cm
Bredd:	69 cm	69 cm
Längd:	81 cm	81 cm
Sitthöjd:	56 cm	62 cm
Sittbredd:	46 cm	46 cm
Hjulstorlek:	12"/31 cm	12"/31 cm
Dimensioner ihopfälld H x L x B	81 x 28 x 88 cm (L x B x H)	81 x 28 x 88 cm (L x B x H)
Storlek hopfälld utan hjul H x L x B:	67 x 28 x 76 cm (L x B x H)	67 x 28 x 76 cm (L x B x H)
Vikt:	9,1 kg	9,2 kg
Transportvikt — utan hjul:	6,4 kg	6,5 kg
Max användarvikt:	150 kg	150 kg

## Säkerhet

- När du sitter på rollatorn ska båda bromsarna vara låsta i parkeringsläge.
- Kontrollera att din Walker är låst i utfällt läge innan du går med den.
- Iaktta försiktighet i brant terräng och på sluttande underlag.
- Walkerns stabilitet testas med en korgbelastning på 5 kg. Om du laddar extra vikt i korgen, se till att fördela vikten jämnt i korgen.
- **VIKTIGT:** Om du skulle råka ut för en allvarlig olycka/incident när du använder denna medicintekniska produkt, se till att rapportera händelsen till tillverkaren och till relevant medicinsk myndighet i det land där du bor.

# Korrekt handtagshöjd



## Hur du ställer in korrekt grepphöjd på din rollator

Många rollatoranvändare ställer in handtagen för högt i tron att det kommer att främja en mer upprätt kroppshållning. Men detta försämrar faktiskt kroppshållningen, och det påverkar också stabiliteten negativt.

Du kan bestämma rätt handtagshöjd genom att göra enligt följande, som rekommenderat av alla sjukgymnaster och alla rollatortillverkare:

1. Stå upprätt med ryggen så rak som möjligt, med skorna på och med armarna hängande i avslappnat tillstånd längs kroppen (armbågen lätt böjd).
2. Mät det vertikala avståndet från golvet till handledsbenet = rekommenderad grepphöjd.

## Med handtagen i handledshöjd:

- Behöver du inte höja axlarna och du kan avlasta en större del av din kroppsvikt.
- Kan du gå närmare handtagen, vilket ger en mer upprätt kroppshållning.
- När du en mer vertikal viktfordelning (nedåt), vilket förbättrar både stabiliteten och bromsprestandan.

# Första gången



1. Fäll ut din Walker genom att dra handtagen från varandra.




2. Greppa höger handtag med höger hand och lyft höger fram- och bakhjul från marken. Med de högra hjulen lyfta, tryck med vänster hand det bakre vänstra hörnet på sitsen distinkt nedåt tills du hör ett svagt "klick".



3. Innan du använder din Walker, bekräfta att utfällningsmekanismen är säkert låst.

**OBS:** Det är viktigt att du lyfter de högra hjulen från marken, så att höger framhjul fritt kan rotera till sin korrekta position.

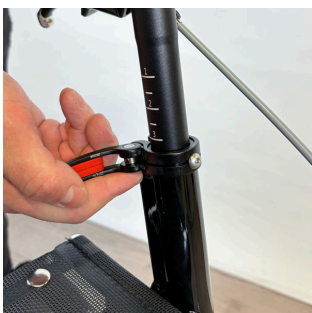


4. Öppna snabbkopplingarna och justera grepphöjden enligt beskrivningen på sidan 7 i kapitlet "Höjdställning av handtag".

# Parkeringsbroms




Parkeringsbromsen kan aktiveras på 3 olika sätt:

**Alternativ 1:** Tryck den undre röda parkeringsarmen nedåt med pekfingeret, medan du samtidigt drar bromshandtaget uppåt. Säkerställ att parkeringsbromsen är låst, och att rollatorn inte rullar.

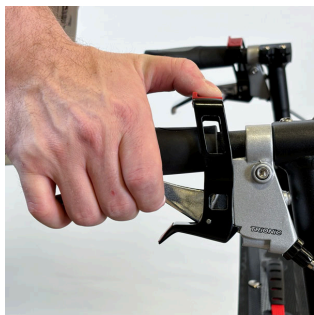

**Alternativ 2:** Dra den övre röda parkeringsarmen bakåt med tummen, medan du samtidigt drar bromshandtaget uppåt. Säkerställ att parkeringsbromsen är låst, och att rollatorn inte rullar.

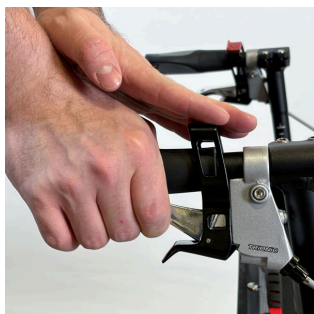

**Alternativ 3:** Använd båda händerna. Dra den övre röda parkeringsarmen bakåt med ena handen, medan du samtidigt drar bromshandtaget uppåt med din andra hand. Säkerställ att parkeringsbromsen är låst, och att rollatorn inte rullar.

För att frigöra parkeringsbromsen, bromsa som vid färdbramsning så släpper parkeringspärren.



## Färdbroms

Drag bromshandtaget uppåt för att bromsa när du går. Bromsa med båda bromsarna samtidigt.

## Höjdinställning av handtag



1. Lossa snabbkopplingen just ovanför sitsen genom att vika ut den horisontellt.



2. Ställ in rätt grepphöjd genom att höja/sänka handtaget.



3. Lås handtaget på vald höjd genom att låsa/vika tillbaka snabbkopplingen.

**OBS:** Använd inte snabbkopplingen som en vingmutter eller skruv.

## Inställning av handtagsvinkel

Vinkeln på handtagen kan ställas in så att du får en komfortabel handposition och ett optimalt stöd.



1. Lossa den bakre skruven på handtaget med en 4 mm insexnyckel.



2. Vrid handtaget till önskad position, och lås handtaget genom att dra åt skruven igen.

# Hopfällning



1. Ta tag i sitshandtaget och dra det uppåt, och din Walker fälls ihop.



2. Skjut de båda handtaget mot varandra.

# Utfällning



1. Fäll ut din Walker genom att dra handtagen från varandra.



2. Greppa höger handtag med höger hand och lyft höger fram- och bakhjul från marken. Med de högra hjulen lyfta, tryck med vänster hand det bakre vänstra hörnet på sitsen distinkt nedåt tills du hör ett svagt "klick".



3. Innan du använder din Walker, bekräfta att utfällningsmekanismen är säkert låst.

**OBS:** Det är viktigt att du lyfter de högra hjulen från marken, så att höger framhjul fritt kan rotera till sin korrekta position.




**OBS!** Lås alltid båda parkeringsbromsarna innan du använder sitsen.

## Ta av framhjulen



1. Lossa snabbkopplingen på framhjulet genom att vika ut den.

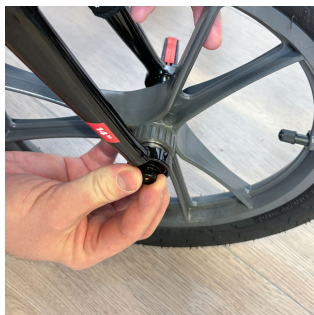

2. Lossa muttern på insidan av gaffeln lite, så att hjulet kan tas ur gaffeln.



3. Ta bort hjulet från gaffeln.



4. **OBS:** Använd inte snabbkopplingen som en vingmutter eller skruv.

# Montera framhjulen



1. Montera hjulet i gaffeln, med snabbkopplingen på utsidan av rollatorn.



2. Skruva åt muttern på insidan av gaffeln, så att snabbkopplingen kan låsas ordentligt.



3. Lås snabbkopplingen på framhjulet genom att vika den inåt. Säkerställ att hjulet sitter fast ordentligt. Idealiskt skall snabbkopplingsarmen vara positionerad bakom gaffeln, sett i färdriktningen.



4. **OBS:** Använd inte snabbkopplingen som en vingmutter eller skruv.

## Ta av / montera bakhjulen

Bakhjulen är avtagbara för att ytterligare underlätta transport av din Walker.



1. För att ta av hjulet, tryck in den svarta knappen i hjulets centrum och ta sen av hjulet.



2. Vid montering av hjulet, tryck in den svarta knappen i hjulets centrum och skjut in hjulaxeln i axelhålet. Släpp knappen då hjulet är i sitt ändläge.

3. Kontrollera att hjulet sitter fast ordentligt genom att ta tag i däcket och vicka hjulet fram och tillbaka i sidled.

## Justering av bromsverkan



1. Vid dålig bromsverkan, skruva ut justerskruven på respektive bromshandtag (moturs) och lås sedan justerskruven genom att skruva in låsmuttern mot handtaget (medurs).



Om bromsverkan fortfarande är bristfällig, kontakta Trionic, din återförsäljare eller auktoriserad person ansvarig för service av din Trionic Walker.

---

## Hjultryck



Eftersom din Veloped har luftfyllda hjul bör lufttrycket kontrolleras regelbundet. Trionic rekommenderar ett däckstryck på 1,5 bar / 22 psi.

Maximalt lufttryck är 2,5 bar/35 psi.

# Säkerhetsanvisningar

Kontrollera att din Trionic Walker fungerar perfekt innan du använder den:

- Kontrollera bromsverkan samt parkeringsbroms.
- Se till att den är ordentligt utfälld.
- Kontrollera att handtagen har rätt höjd samt att de är låsta ordentligt.
- Användarens maxvikt får ej överstiga 150 kg.
- För att säkerställa produktens funktioner rekommenderas en årlig kontroll av din Veloped via ett av Trionic eller distributör godkänt serviceställe.
- En defekt Walker bör inte användas.

---

## Skötselanvisning

För att upprätthålla funktion och säkerhet bör du regelbundet se till att nedanstående åtgärder utföres:

- Rengör din Walker med vanligt diskmedel, vatten och en disktrasa. Torka den torr.
- Håll hjulen rena med diskmedel, vatten och en plastborste.
- Kontrollera att skruvar och reglage är ordentligt åtdragna.
- Om din Walker inte är i fullgod kondition – tag genast kontakt med din återförsäljare eller auktoriserad person ansvarig för service av Trionic Walker.

Kontrollera lufttrycket i däcken var 4-5 vecka. Trionic rekommenderar ett däckstryck på 1,5 bar / 22 psi.

OBS! Defekt Walker bör inte användas. För ingrepp på produkten (anpassningar, bristfälliga reparationer), utan Trionics medgivande, ansvaras ej.

# Garanti

Trionic Walker inkluderar 10 års garanti, undantaget delar som är utsatta för normalt slitage (däck, slangar, bromskablar, bromskabelhöljen, handtag och textildelar). Garantin är giltig fr.o.m. köpdatum, och inkluderar bara originaldelar från Trionic.



CE – Trionic Sverige AB garanterar att denna medicintekniska produkt av klass I uppfyller kraven i EU-förordningen MDR 2017/745 och att den är certifierad enligt ISO 11199-2:2021.




# Etikett

Veloped är testad och godkänd enligt den internationella standarden för rullatorer ISO 11199-2:2021 och uppfyller kraven i EU-förordningen för medicintekniska produkter MDR 2017/745.

Användarens vikt får ej överstiga 150 kg.

1. Tillverkare
2. Max brukarvikt
3. Bredd
4. Längd
5. Max. och min. höjd
6. Tillverkningsdatum
7. Serienummer
8. Läs användarhandboken före användning.
9. Enligt ISO-standard är den huvudsakligen avsedd för utomhusbruk.
10. Produktkod: EAN 13
11. Artikelnummer
12. Produkt godkänd enligt MDR 2017/745

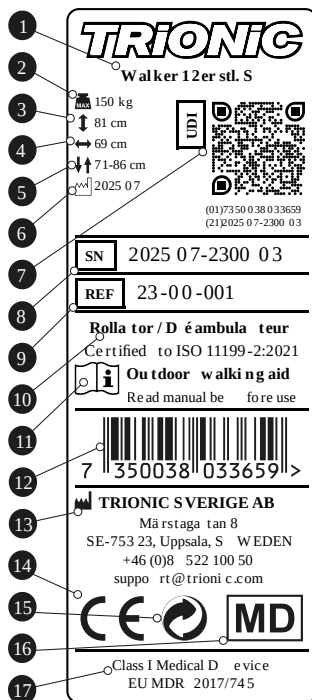

# Miljövänlighet

Trionic Walker är tillverkad så att den har så liten negativ miljöpåverkan som möjligt under sin livscykel. När produkten tjänat ut kan den skrotas och delarna tillvaratas för återvinning.

- Vid återvinning separeras produktens aluminiumkomponenter från övriga detaljer. Delarna sorteras efter metall, plast och blandmaterial.
- Produkten består till största del av aluminium, stål och plast.
- Exempel på komponenter tillverkade av blandade material är bromsspakar, hjul och handtag.
- Eftersom olika kommuner/återvinningsföretag hanterar återvinningsmaterial på olika sätt är det lämpligast att i tveksamma fall kontakta din kommun.

Trionic Sverige AB är anslutet till Näringslivets Producentansvar i Sverige AB, som är ett rikstäckande system för återvinning av förpackningar.



## ***Rollatorfilmer***

Titta på instruktionerna på din smarttelefon. Öppna kameraappen, rikta den mot QR-koden och håll telefonen stilla tills ett meddelande eller en länk visas på skärmen. Tryck på meddelandet för att öppna länken och börja titta på videon. Dessutom finns en manuell länk för direktåtkomst till videon på din dator. Tveka inte att kontakta vårt supportteam om du har några problem eller behöver ytterligare hjälp.

### ***Förvara Rollator Walker 12er bakom baksätet på bilen.***

Det är lätt att fälla ihop rollatorn och packa den i baksätet på din bil.



Läs mer : [qr.trionic.info/backseat](https://qr.trionic.info/backseat)



# **Garantibevis**

Trionic Walker inkluderar 10 års garanti, undantaget delar som är utsatta för normalt slitage (däck, slangar, bromskablar, bromskabelhöljen, handtag och textildelar). Garantin är giltig fr.o.m. köpdatum, och inkluderar bara originaldelar från Trionic.

Inköpsdatum:

Serienummer:

Datum/Signatur

Trionic Sverige AB · Märstagatan  
8 · 75323 Uppsala · Sverige

[support@trionic.com](mailto:support@trionic.com)

08-522 100 50



**TRiONiC**